

VistaScan Mini Easy – semplice e compatto

Tecnologia PCS dei film ai fosfori Dürr Dental all'avanguardia



ARIA COMPRESSA
ASPIRAZIONE
IMAGING
CONSERVATIVA
IGIENE

VistaScan Mini Easy – semplice e compatto


VistaScan Mini Easy agevola notevolmente l'utilizzo dei sistemi-immagine per lo studio dentistico: con la comprovata validità tecnica e la straordinaria qualità d'immagine che contraddistinguono gli scanner per film ai fosfori Dürr Dental in tutto il mondo. Made in Germany.



Film ai fosfori
meglio
dei sensori! *


Scanner per film ai fosfori VistaScan Mini Easy

Dall'introduzione dello sviluppo della pellicola radiografica convenzionale in medicina odontoiatrica, Dürr Dental è all'avanguardia nell'ambito della diagnostica. Con Dürr Dental, la radiografia digitale offre all'odontoiatra immagini ad alta risoluzione, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza diagnostica. Più di 40 anni di esperienza nello sviluppo della tecnologia radiologica portano a soluzioni sempre pratiche ed innovative. Lo scanner per film ai fosfori VistaScan Mini Easy rende ancor più celere la diagnostica per il dentista. Questo apparecchio compatto, particolarmente semplice nell'utilizzo, necessita di una superficie di appoggio ridotta e può pertanto trovare spazio anche nello studio operativo. Vantaggio: radiografare e scannerizzare direttamente al riunito. I film ai fosfori VistaScan, riutilizzabili, vengono acquisiti ad altissima qualità in pochi secondi. Passare al digitale non è mai stato così semplice.

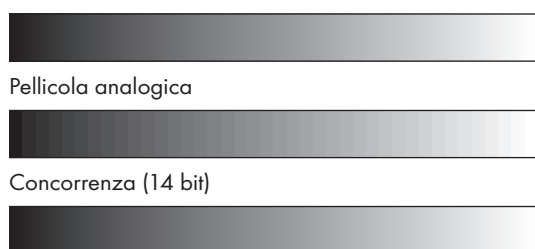

VistaScan (16 bit)

La scala dei grigi dei film ai fosfori con VistaScan a confronto.

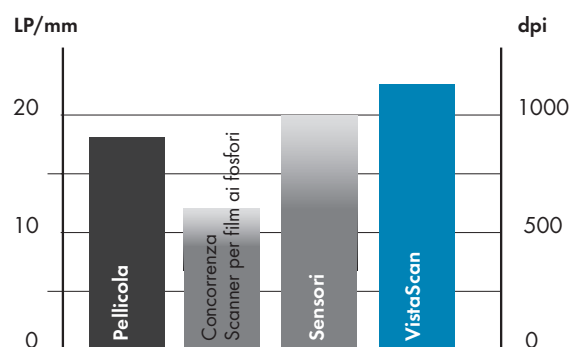


La risoluzione effettiva dell'immagine nei vari sistemi a raggi X a confronto: i sistemi VistaScan di Dürr Dental sono dotati, rispetto alla concorrenza, di un più alto grado di risoluzione.



Immagini ad alta risoluzione

Con bassa rumorosità supportano una diagnosi sicura.

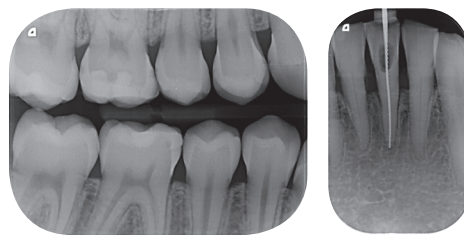

Formati comuni

Film ai fosfori size 0 e size 2 possono essere utilizzati con VistaScan Mini Easy. Inoltre, è disponibile il 100% di superficie attiva. Semplice utilizzo - come per la pellicola analogica.



Semplice utilizzo

Particolarmente facile da utilizzare: lettura, cancellazione e disponibilità per l'uso successivo in un solo passaggio. Immagine disponibile a partire da 6 secondi, direttamente accanto al paziente.




Tratti distintivi:

- Rapida disponibilità dell'immagine
- Design compatto
- Ideale come apparecchiatura chairside
- Ergonomia valutata nei dettagli
- Interfaccia USB / rete
- Elevata qualità delle immagini
- Per i formati intraorali comuni

Semplice integrazione

VistaScan Mini Easy funziona sia con DBSWIN sia con altri pacchetti software tramite plug-in o driver Twain. VistaScan Mini Easy si integra senza alcun problema nel sistema informatico dello studio dentistico tramite interfaccia USB o rete.

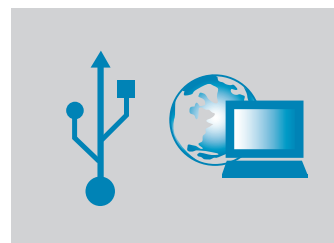

Dati tecnici e accessori

VistaScan Mini Easy	
Formato film ai fosfori	size 0 (2 x 3 cm) + size 2 (3 x 4 cm)
Risoluzione effettiva (lp/mm)	22 (1100 dpi)
Peso (kg)	6.5
Dimensioni (H x L x P mm)	234 x 226 x 243
Funzione stand-by	Sì
Interfacce	USB/rete



Centratore per i film ai fosfori

I centratore per film ai fosfori Dürr Dental offrono, grazie ai loro angoli smussati, una protezione ottimale ai film ai fosfori. Sono disponibili centratore per tutte le aree di applicazione, per eseguire riprese radiografiche precise.



Disinfezione con FD 350, FD 333

I fazzoletti disinfettanti FD 350 Dürr Dental sono particolarmente indicati per la disinfezione per strofinamento e per la pulizia dei dispositivi medici. Grazie alla loro dimensione, sono ideali per la pulizia di piccoli oggetti e superfici, come involucri di film ai fosfori e pellicole intraorali, manipoli e contrangoli: subito pronti all'uso, non lasciano residui e detergono rapidamente. La soluzione completamente virucida è offerta dai fazzoletti disinfettanti FD 333.



Panno per la pulizia dei film ai fosfori

Le impurità sui film ai fosfori sono visibili sull'immagine e riducono la durata degli stessi. Il panno di pulizia per i film ai fosfori VistaScan li pulisce a fondo, coniugando un effetto disinfettante. Vantaggio: qualità d'immagine ottimale che dura nel tempo.